



Quickstart **GUIDE**



www.elcie-healthy.com





1 CHARGE YOUR CONNECTED GLASSES

Charge your connected glasses until the green LED is blinking (full charge).


The charger of your connected glasses is composed of:

- **A USB power cable**
- **A charging magnetic connector**

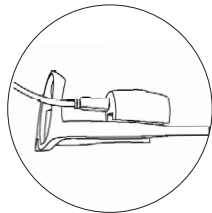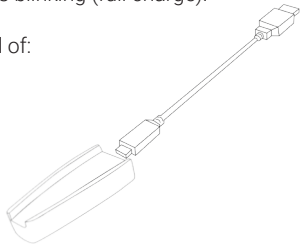

2 ADAPT THE GLASSES' ARMS.

The end of branches are adjustable. Bend them gently in order to fit your ears.

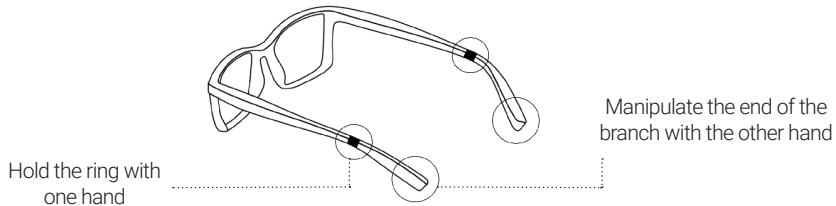

3 INSTALL THE ELLCIE HEALTHY APP



Download the Elcie Healthy application on the Store, by typing « Elcie Healthy » in the search bar.

Run the application and accept the permissions required by the application.

Create your account as a new user and register by agreeing the terms of service.

4 CONNECT YOUR GLASSES WITH YOUR SMARTPHONE

After completing your registration and confirming the creation of your account, the application takes you to the «START PAIRING».

Fold the branches of your glasses and take them in one hand. **Shake the glasses** vigorously for 5 to 10 seconds until you hear the **pairing melody** and see the LEDs light up in blue. On your App, wait during the search and **click on the line** corresponding to your glasses.



5 USE CASE



Drowsiness detection

- During the trip, the application informs you in real-time of your **level of drowsiness**. If there is any sign of fatigue, the glasses assess the risk and **send you light and sound signals**.
- In the event of a level 5 alert, a **teleoperator*** will offer you personalized support to ensure your safety and you will benefit from the following Tele assistance services.
- In case of drowsiness detected, your loved ones are **alerted** in real-time by SMS.




Fall detection

- When worn and connected via Bluetooth with your smartphone, the connected glasses automatically trigger an SOS alert.
- If a fall is detected, an alert will be sent to your family or a professional helpline to provide the user with appropriate assistance as soon as possible.
- Manual triggering of an alert from the Serenity by Ellcie Healthy mobile application allows you to send a message to the designated person.

6 HOW DOES IT WORK?

Fifteen embedded sensors (accelerometer, gyroscope, temperature sensor, atmospheric pressure ...), collect physical, physiological and environmental data.

Connected Eyewear features the latest in state-of-the-art technology. Unique Artificial Intelligence analyzes the collected data. A specialized learning system refines this information and provides accurate, real-time results. to reality as possible.

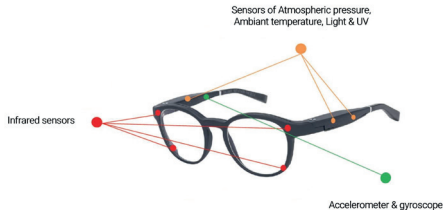

Lisez et conservez à portée de main les consignes de sécurité et le mode d'emploi

1 Chargez vos montures connectées

Chargez vos montures connectées jusqu'au clignotement de la LED verte (charge 100%). Le kit charge de vos lunettes connectées est composé: d'un câble d'alimentation USB et micro USB ainsi que d'un aimant de chargement.

2 Ajustez vos montures connectées

Les montures doivent être bien centrées sur votre visage. Les bagues, placées au bout des branches sont ajustables. Pliez-les afin de les adapter à vos oreilles. Tenez les lunettes au niveau de la bague avec une main puis ajustez le bout de la branche avec l'autre main.

3 Installez l'application Elcie Healthy

Téléchargez l'application depuis le Store, en tapant « Elcie Healthy » dans la barre de recherche.

Lancez l'application et validez les permissions nécessaires au bon fonctionnement de l'application.

Créez votre compte en tant que nouvel utilisateur et inscrivez-vous en acceptant les conditions générales d'utilisation.

4 Connectez vos lunettes à votre smartphone

Après avoir terminé votre inscription et avoir confirmé la création de votre compte, l'application vous amène à la phase « Appairage des lunettes ».

Rabattez les branches de votre monture et prenez-la dans une main. Secouez énergiquement les lunettes pendant 5 à 10 secondes jusqu'à entendre la mélodie d'appairage et voir s'allumer les LEDs en bleu. Sur votre application, patientez le temps de la recherche puis cliquez sur la ligne correspondante à vos lunettes.

Dopo la lettura, le raccomandiamo di conservare il manuale e le istruzioni di sicurezza per ogni necessità futura.

1 Caricate la batteria degli occhiali Elcie

Caricate la batteria degli occhiali connessi. Una volta la batteria carica al 100%, il LED verde lampeggerà. Il kit di ricarica degli occhiali connessi è composto da: un cavo USB e micro-USB, un adattatore magnetico..

2 Regolate gli occhiali

La montatura deve essere posizionata al centro del viso. La parte finale delle aste può essere aggiustata, piegandola, per compensare la diversa posizione delle orecchie. Tenete l'asta a livello dell'anello metallico e piegatela delicatamente.

3 Installare l'applicazione Elcie Healthy

Scaricate l'applicazione tramite lo Store cliccando sul link "Elcie Healthy" nella barra di ricerca.

Lanciate l'applicazione e attivate le autorizzazioni necessarie per un corretto funzionamento dell'applicazione.

Create un nuovo account e iscrivetevi.

4 Collegare gli occhiali allo smartphone

Dopo aver completato la registrazione e confermato la creazione del tuo account, l'applicazione ti porterà alla fase di «accoppiamento degli occhiali».

Rientrate le stanghette dell'occhiale. Agitate energicamente gli occhiali per 5 o 10 secondi finché non udite una melodia e non vedete il LED lampeggiare in blu (inizio del processo di pairing).

Dopo qualche secondo, sull'applicazione smartphone, vedrete apparire una line col nome dei vostri occhiali. Toccate lo schermo in corrispondenza della linea col nome per terminare il processo di collegamento.

Guía de inicio

Por favor lea y conserve a la mano las

1 Cargue su montura conectada inteligente

Cargue su montura hasta observar el parpadeo del LED color verde (carga al 100%). El cargador de sus lentes conectados consta de: un cable de alimentación USB - micro USB y un conector de carga magnético.

2 Ajuste su montura conectada

La montura debe estar correctamente centrada sobre su rostro. El mango al final de cada una de las patas de su montura es ajustable. Doble los mangos para adaptarlos a sus orejas. Para ello, sostenga la montura al nivel del mango con una mano y después ajuste el extremo de la pata con la otra mano.

3 Instale la aplicación Elcie Healthy

Descargue la aplicación desde el App Store de su teléfono inteligente, escribiendo "Elcie Healthy" en la barra de búsqueda.

Ejecute la aplicación y valide los permisos necesarios para su buen funcionamiento.

Cree su cuenta como nuevo usuario y suscribase.

4 Conecte su montura a su teléfono inteligente

Después de completar su registro y confirmar la creación de su cuenta, la aplicación lo llevará a la fase de «emparejamiento de lentes».

Pliegue ambas patas de su montura y sosténgala con una mano. Sacuda enérgicamente sus lentes durante 5 a 10 segundos hasta escuchar la melodía de emparejamiento y observar el LED de color azul encenderse. En su aplicación móvil, espere el tiempo de la búsqueda luego seleccione la línea correspondiente a sus lentes.

Kurzanleitung Bitte lesen und bewahren Sie alle Sicherheitsvorkehrungen auf

1 Laden sie ihre angeschlossenen brillen auf

Laden Sie Ihre angeschlossenen Brillen auf, bis das Grün blinkt (volle Ladung). Die Ladung Ihrer angeschlossenen Brille setzt sich aus drei Komponenten zusammen: Ein USB-Stromkabel, Ein Lademagnetstecker.

2 Passen Sie die Brillenarme an

Die Ärmel an den Enden der Äste sind verstellbar. Biegen Sie sie vorsichtig, um sie an Ihre Ohren anzupassen. Halten Sie den Ring mit einer Hand und fassen Sie das Ende des Astes mit der anderen Hand an

3 Installieren sie die ellcie healty app

Laden Sie die App im Store herunter, indem Sie «Ellcie Healthy» in die Suchleiste eingeben. Führen Sie die Anwendung aus und akzeptieren Sie die von der Anwendung erforderlichen Berechtigungen. Erstellen Sie Ihr Konto als neuer Benutzer und registrieren Sie sich, indem Sie den Nutzungsbedingungen zustimmen.

4 Verbinden sie ihre brille mit ihrem smartphone

Nachdem Sie Ihre Registrierung abgeschlossen und die Erstellung Ihres Kontos bestätigt haben, werden Sie von der Anwendung in die Phase «Pairing Glasses» versetzt. Falten Sie die Zweige Ihrer Brille und nehmen Sie sie in eine Hand. Schütteln Sie die Brille 5 bis 10 Sekunden lang kräftig, bis Sie das Pairing hören und die LEDs blau aufleuchten. Warten Sie während der Suche in Ihrer App und klicken Sie auf die Zeile, die Ihrer Brille entspricht.

ご使用前に本説明書をよくお読みの上、製品をご利用ください。

1 スマートメガネを充電する

ライトが緑色に点灯するまで充電を行ってください。
スマートメガネの充電器は、2つの部品で構成されています：
-USB電源ケーブル 1つ
-充電マグネットコネクタ 1つ
充電器を接続し準備が整ったら、左側 temple に充電マグネットを接続します。

2 つるの先端部分を調整

つるの部分は調整可能です。先端部分をそっと曲げて、耳にきちんとフィットするよう調節してください。
リング(つるの銀色の部分)を片手で持ち、つるの先端をもう片方の手で曲げて調整してください。

3 ELLCIE HEALTHYアプリをインストールする

アプリストアの検索バーに「」と入力し、Ellcie Healthyアプリをダウンロードしてください。
ダウンロードが終了し、アプリがインストールされたら、ホームスクリーンからアプリを起動してください。Ellcie Healthy アプリを初めて起動するとき、アプリの最適な操作のために、表示されるスマートフォン機能の許可リクエストを全ての承諾することをお勧めします。
「新しいユーザー」をクリックして、アカウントを作成し、あなたの情報を記入してください。

4 フレームをスマートフォンにペアリングする

メガネの2つの temple を折りたたみ、片手で持ってください。
5秒から10秒、青い点灯とペアリングのメロディーが聞こえるまで、メガネを強く振ってください。表示されたメガネの製品番号をクリックしてください。これでペアリング完了です。

Download the complete user guide



An abnormal use of your Ellcie Healthy connected glasses (non-compliance of the recommended uses as presented below) may void the Ellcie Healthy warranty. Without being exhaustive, do not heat the glasses or put them near a heat source, do not immerse the glasses under water, do not step on the glasses, do not have children (or animals) wear the glasses, do not put the glasses in a microwave. For an optimal performance, make sure to have a good centering of the glasses on your face. Some make ups could also interfere with the sensor's behavior.



In order to ensure the optimal use of your connected glasses, personal data, including physiological data that may constitute personal health data, may be collected by the Ellcie Healthy app. Using Ellcie Healthy application implies your consent to this collection. For more information about collected data and your rights in relation to the processing of this data, you can visit our website at the following address:
www.ellcie-healthy.com/legal-notice/