



# Quickstart **GUIDE**

[www.elcie-healthy.com](http://www.elcie-healthy.com)




# 1 CHARGEZ VOS LUNETTES CONNECTÉES

Chargez vos lunettes connectées jusqu'au clignotement de la LED verte (charge complète).

Le kit de charge de vos lunettes connectée est composé:


- d'un cable d'alimentation USB et micro-USB
- d'un aimant de chargement

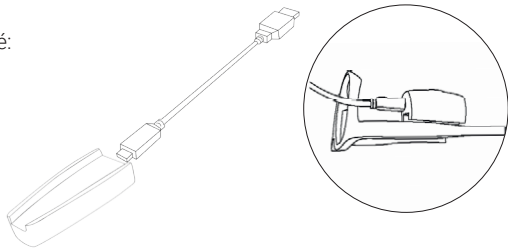

## 2 AJUSTEZ VOS LUNETTES CONNECTÉES

Les montures doivent être bien centrées sur votre visage.  
Les branches sont ajustables à partir des bagues.  
Pliez les branches afin de les ajuster à vos oreilles.

Tenez la bague  
avec une main

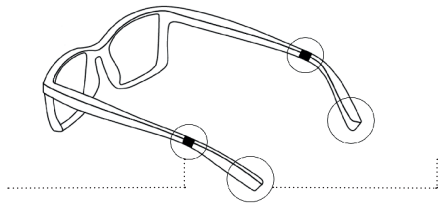

Ajustez le bout de la  
branche avec l'autre main

### 3 INSTALLEZ L'APPLICATION



**Téléchargez l'application Elcie Healthy** depuis le store, en tapant « Elcie Healthy » dans la barre de recherche.

**Lancez l'application** et acceptez les conditions nécessaires au bon fonctionnement de la solution.

**Créez votre compte** en tant que nouvel utilisateur et inscrivez-vous en acceptant les Conditions Générales d'Utilisation.

## 4 CONNECTEZ VOS LUNETTES AVEC VOTRE SMARTPHONE

Après avoir terminé votre inscription et confirmé votre compte, l'application vous amène à la **phase d'appairage** des lunettes.

**Rabattez les branches** de vos lunettes et prenez-les à une main. **Secouez les lunettes** vigoureusement pendant 5 à 10 secondes jusqu'à entendre la mélodie d'appairage et voir s'allumer les **LEDs en bleu**. Sur votre application, patientez durant la recherche puis **cliquez sur la ligne** correspondante à vos lunettes.



Read and keep the safety instructions & the user manual

### **1 Charge your connected glasses**

Charge your connected glasses until the green LED is blinking (full charge). The charger of your connected glasses is composed of a USB power cable and a charging magnetic connector.

### **2 Adapt the glasses' arms**

The sleeves at the end of branches are adjustable. Bend them gently in order to fit your ears. Hold the ring with one hand and manipulate the end of the branch with the other hand.

### **3 Install the Elcie Healthy App**

Download the Elcie Healthy application on the store by typing «Elcie Healthy» in the search bar. Run the application and accept the permissions required by the application. Create your account as a new user and register by agreeing the terms of service.

### **4 Connect your glasses with your smartphone**

After completing your registration and confirming the creation of your account, the application takes you to the «start pairing». Fold the branches of your glasses and take them in one hand. Shake the glasses vigorously for 5 to 10 seconds until you hear the pairing melody and see the LEDs light up in blue. On your App, wait during the search and click on the line corresponding to your glasses.

Dopo la lettura, le raccomandiamo di conservare il manuale e le istruzioni di sicurezza per ogni necessità futura.

### **1 Caricate la batteria degli occhiali Elcie**

Caricate la batteria degli occhiali connessi. Una volta la batteria carica al 100%, il LED verde lampeggerà. Il kit di ricarica degli occhiali connessi è composto da: un cavo USB e micro-USB, un adattatore magnetico..

### **2 Regolate gli occhiali**

La montatura deve essere posizionata al centro del viso. La parte finale delle aste può essere aggiustata, piegandola, per compensare la diversa posizione delle orecchie. Tenete l'asta a livello dell'anello metallico e piegatela delicatamente.

### **3 Installare l'applicazione Elcie Healthy**

Scaricate l'applicazione Elcie Healthy tramite lo Store cliccando sul link "Elcie Healthy" nella barra di ricerca. Lanciate l'applicazione e attivate le autorizzazioni necessarie per un corretto funzionamento dell'applicazione. Create un nuovo account e iscrivetevi.

### **4 Collegate gli occhiali allo smartphone**

Dopo aver completato la registrazione e confermato la creazione del tuo account, l'applicazione ti porterà alla fase di «accoppiamento degli occhiali». Rientrate le stanghette dell'occhiale. Agitate energicamente gli occhiali per 5 o 10 secondi finché non udite una melodia e non vedete il LED lampeggiare in blu (inizio del processo di pairing). Dopo qualche secondo, sull'applicazione smartphone, vedrete apparire una line col nome dei vostri occhiali. Toccate lo schermo in corrispondenza della linea col nome per terminare il processo di collegamento.

Guía de inicio

Por favor lea y conserve a la mano las

### **1 Cargue su montura conectada inteligente**

Cargue su montura hasta observar el parpadeo del LED color verde (carga al 100%). El cargador de sus lentes conectados consta de: un cable de alimentación USB - micro USB y un conector de carga magnético.

### **2 Ajuste su montura conectada**

La montura debe estar correctamente centrada sobre su rostro. El mango al final de cada una de las patas de su montura es ajustable. Doble los mangos para adaptarlos a sus orejas. Para ello, sostenga la montura al nivel del mango con una mano y después ajuste el extremo de la pata con la otra mano.

### **3 Instale la aplicación Elcie Healthy**

Descargue la aplicación Elcie Healthy desde el App Store de su teléfono inteligente, escribiendo "Elcie Healthy" en la barra de búsqueda. Ejecute la aplicación y valide los permisos necesarios para su buen funcionamiento.

### **4 Conecte su montura a su teléfono inteligente**

Después de completar su registro y confirmar la creación de su cuenta, la aplicación lo llevará a la fase de «emparejamiento de lentes». Pliegue ambas patas de su montura y sosténgala con una mano. Sacuda enérgicamente sus lentes durante 5 a 10 segundos hasta escuchar la melodía de emparejamiento y observar el LED de color azul encenderse. En su aplicación móvil, espere el tiempo de la búsqueda luego seleccione la línea correspondiente a sus lentes.

Kurzanleitung Bitte lesen und bewahren Sie alle Sicherheitsvorkehrungen auf

### 1 Laden sie ihre angeschlossenen brillen auf

Laden Sie Ihre angeschlossenen Brillen auf, bis das Grün blinkt (volle Ladung). Die Ladung Ihrer angeschlossenen Brille setzt sich aus drei Komponenten zusammen: Ein USB-Stromkabel, Ein Lademagnetstecker.

### 2 Passen Sie die Brillenarme an

Die Ärmel an den Enden der Äste sind verstellbar. Biegen Sie sie vorsichtig, um sie an Ihre Ohren anzupassen. Halten Sie den Ring mit einer Hand und fassen Sie das Ende des Astes mit der anderen Hand an

### 3 Installieren sie die ellcie healthy app

Laden Sie die Ellcie Healthy-App im Store herunter, indem Sie «Ellcie Healthy» in die Suchleiste eingeben. Führen Sie die Anwendung aus und akzeptieren Sie die von der Anwendung erforderlichen Berechtigungen. Erstellen Sie Ihr Konto als neuer Benutzer und registrieren Sie sich, indem Sie den Nutzungsbedingungen zustimmen.

### 4 Verbinden sie ihre brille mit ihrem smartphone

Nachdem Sie Ihre Registrierung abgeschlossen und die Erstellung Ihres Kontos bestätigt haben, werden Sie von der Anwendung Ellcie Healthy in die Phase «Pairing Glasses» versetzt. Falten Sie die Zweige Ihrer Brille und nehmen Sie sie in eine Hand. Schütteln Sie die Brille 5 bis 10 Sekunden lang kräftig, bis Sie das Pairing hören und die LEDs blau aufleuchten. Warten Sie während der Suche in Ihrer App und klicken Sie auf die Zeile, die Ihrer Brille entspricht.

ご使用前に本説明書をよくお読みの上、製品をご利用ください。

### 1 スマートメガネを充電する

ライトが緑色に点灯するまで充電を行ってください。  
スマートメガネの充電器は、2つの部品で構成されています：  
-USB電源ケーブル 1つ  
-充電マグネットコネクタ 1つ  
充電器を接続し準備が整ったら、左側テンプルに充電マグネットを接続します。

### 2 つるの先端部分を調整

つるの部分は調整可能です。先端部分をそっと曲げて、耳にきちんとフィットするよう調節してください。  
リング(つるの銀色の部分)を片手で持ち、つるの先端をもう片方の手で曲げて調整してください。

### 3 ELLCIE HEALTHYアプリをインストールする

アプリストアの検索バーに「Ellcie Healthy」と入力し、Ellcie Healthyアプリをダウンロードしてください。  
ダウンロードが終了し、アプリがインストールされたら、ホームスクリーンからアプリを起動してください。Ellcie Healthy アプリを初めて起動するとき、アプリの最適な操作のために、表示されるスマートフォン機能の許可リクエストを全ての承諾することをお勧めします。  
「新しいユーザー」をクリックして、アカウントを作成し、あなたの情報を記入してください。

### 4 フレームをスマートフォンにペアリングする

メガネの2つのテンプルを折りたたみ、片手で持ってください。  
5秒から10秒、青い点灯とペアリングのメロディーが聞こえるまで、メガネを強く振ってください。表示されたメガネの製品型番をクリックしてください。これでペアリング完了です。

TÉLÉCHARGEZ LE  
GUIDE COMPLET



Une utilisation anormale de vos lunettes connectées Ellcie Healthy (non-respect des recommandations d'emploi comme, par exemple celles présentées ci-dessous) rendra caduques la garantie Ellcie Healthy en cas de dysfonctionnement, de panne ou de casse. Sans que cela soit exhaustif, ne pas faire chauffer les lunettes ou les mettre à proximité d'une source de chaleur, ne pas immerger les lunettes sous l'eau, ne pas marcher sur les lunettes, ne pas faire porter les lunettes à des animaux, ne pas faire porter les lunettes à des enfants, ne pas mettre les lunettes dans un micro-onde.



Afin d'assurer l'utilisation optimale de vos lunettes connectées, des données personnelles, y compris des données physiologiques pouvant constituer des données à caractère personnel concernant la santé, peuvent être collectées par l'application Ellcie Healthy. Votre utilisation de l'application Ellcie Healthy implique votre consentement à cette collecte. Pour plus d'informations concernant les données collectées et vos droits en relation avec le traitement de ces données, vous pouvez vous rendre sur notre site internet à l'adresse suivante :

[www.ellcie-healthy.com/mentions-legales](http://www.ellcie-healthy.com/mentions-legales)